

KEEP LIGHT

Nye standarder for lysterapi udviklet af italienske TUENDA.

KEEP Light kombinerer rød, blå og infrarød lysterapi og skaber dokumenterede resultater inden for hudpleje, hårtab og smertelindring.

Keep Light anvender højintensiv LED-lysteknologi til at stimulere kroppens naturlige biologiske processer.

Multifunktionel fotobiostimulering med LED-lysterapi, som er udviklet med både et åbent og lukket system.

Det åbne system betyder at dermatologer kan anvende det i et bredt behandlingsområde, for eksempel hudkræft behandlinger.

Det lukkede system med 21 forudindstillede protokoller må anvendes af alle, f.eks. kosmetologer og behandlere.



Keep Light anvender tre specifikke bølgelængder:

- **Blåt lys (415 nm):** Effektivt mod akne og uren hud
- **Rødt lys (633 nm):** Anti-aging, stimulering af hårsække, reduktion af hyperpigmentering
- **Infrarødt lys (831 nm):** Smertelindring, reduktion af inflammation, forbedring af blodcirkulation

Behandlingen er non-invasiv, smertefri og uden restitutionstid.

BLÅ
415 nm

RØD
633 nm

INFRARØD
831 nm

Kliniske tests for hudbehandling viser:

- Synlig forbedring af akne og hudstruktur efter få behandlinger
- Reduktion af hyperpigmentering og rødme
- Forbedret blodcirkulation og vævsreparation

Kliniske tests for fysiologiske tilstande viser:


- Minus 2 point på HIT-smerteskalaen (1–6) ved hovedpinebehandling*
- Øget patienttilfredshed gennem skånsom og effektiv behandling

*Chair of Physical and Rehabilitation Medicine –
University “G. d’Annunzio” in Chieti-Pescara Headache treatment with led photobiostimulation

CoB LED kilde




DIP

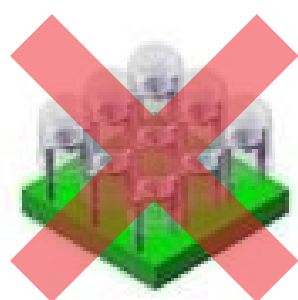


9 LEDs

SMD

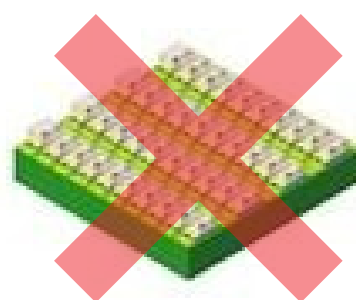

40 LEDs

COB


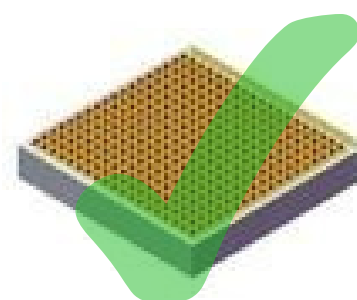


342 LEDs

En CoB LED (eller chip-on-board LED) er mange LED-chips monteret på en energiledende flade, hvilket giver den dokumenterede effekt.

Nem betjening via tablet

Intuitiv betjening via Android tablet
(Bluetooth op til 150 m)
Behandlingen styres sikkert og
uden manuel indsats

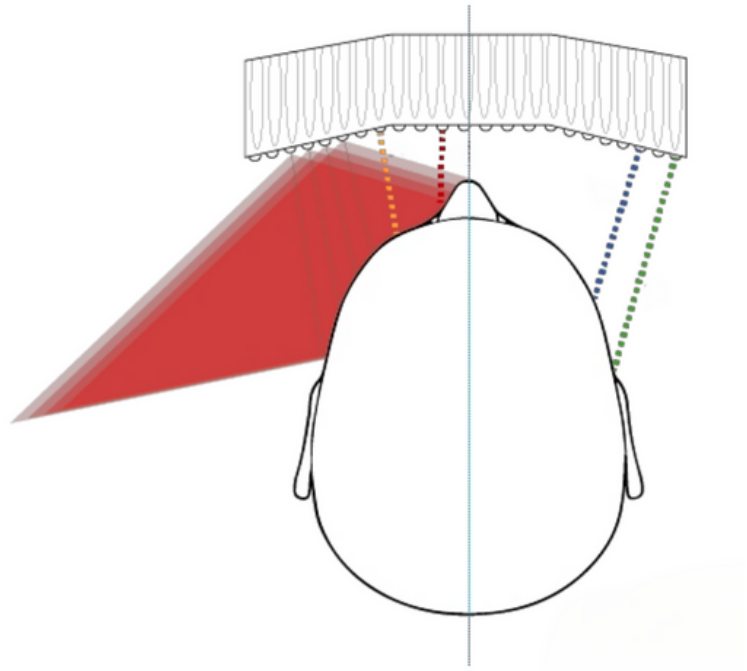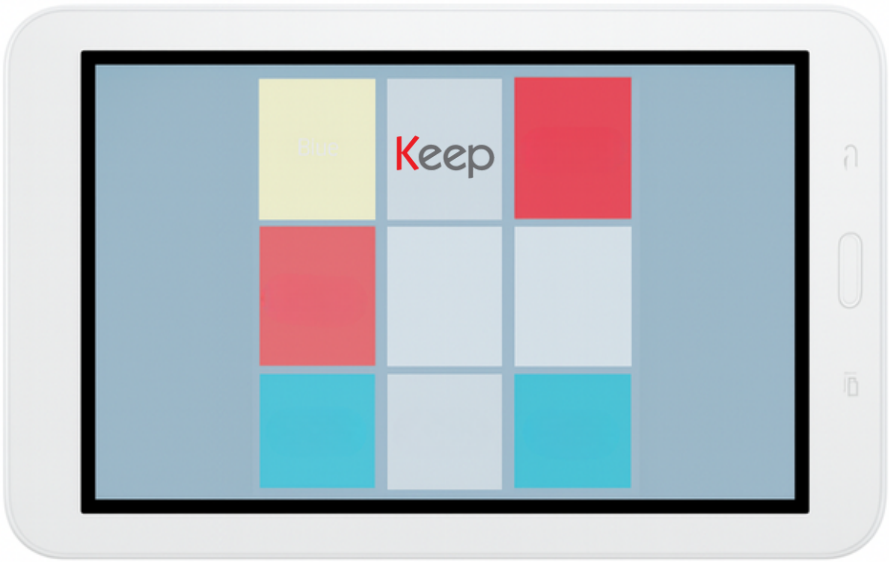

Ergonomisk
Ensartet energifordeling
på hele behandlingsområdet

21 forudindstillede protokoller

AESTETISK BEHANDLING	SKØNHEDSBEHANDLING	FYSIURGISK BEHANDLING
PSORIASIS - Moderat - Svær HUDPIGMENTERING - Pigmentforandringer AKNE - Moderat - Svær TRIKOLOGI - Moderat hårtab - Svær hårtab - Tør hovedbund - Fedtet hovedbund	ANTIAGING - Forebyggelse - Moderat - Svær TALGREGULERING - Forstørrede porer - Fedtet hud - Tør hud SENSITIV HUD - Sensitiv hud GENFUGTENDE - Genfugtende	SMERTER - Forebyggelse - Muskulære smerter - Lændesmerter - Ledsmerter <i>“KEEP Light er udviklet af Tuenda i samarbejde med Bologna Universitet”</i>  ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Leveres med:

Dansk brugervejledning
Dansk support og service
Uddannelse i brugen

Tekniske data:

3 LED-kilder: Blå 415 nm, Rød 633 nm, Infrarød 831 nm
CoB LED-teknologi for ensartet energifordeling
21 forudindstillede protokoller
Effekt: maks. 300 VA
Tilsluttes alm. 220 V kontakt
Leveres med Android tablet, patientbriller og dansk vejledning

Økonomi:

Maskinen kan købes eller leases
Se de nyeste opdateringer samt priser på hjemmesiden –
scan her:



Unica ApS - Stenholm 22 - 9400 Nørresundby

Lovpligtig registreret i Lægemiddelstyrelsen som importør og distributør